

Specialisté v reprocesingu endoskopů více jak 35 let!




WASSENBURG® DRY320

Sušicí a skladovací skříň

Revoluce v ergonomii

BEZPEČNÝ ENDOSKOP PRO KAŽDÉHO PACIENTA

Společnost Wassenburg Medical je lídrem v oblasti reprocesingu endoskopů. Již více než 35 let vyvíjíme inovativní řešení s jediným cílem: zajistit bezpečný endoskop pro každého pacienta. Výsledkem je řada produktů a řešení, která pokrývají celé spektrum reprocesingu endoskopů: komplexní řešení.

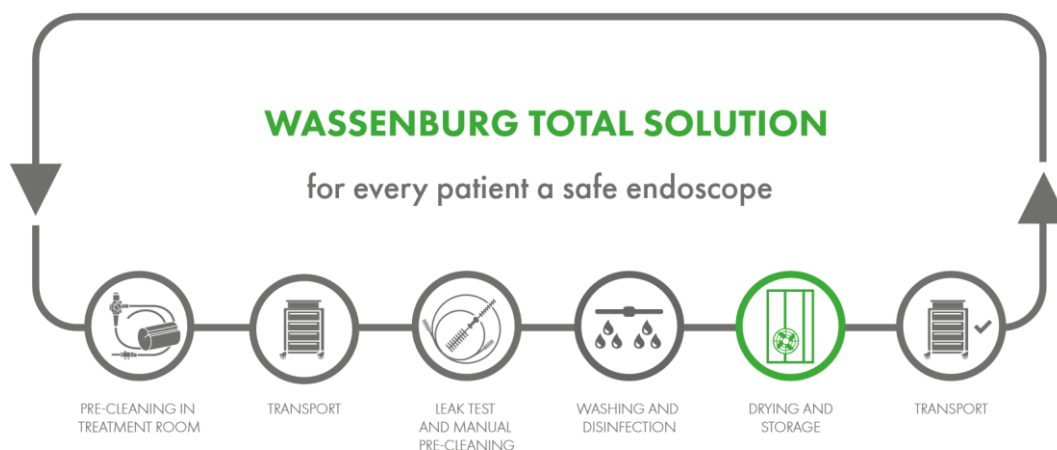

Přístroj WASSENBURG® DRY320 je navržen tak, aby přispěl k bezpečnému a kontrolovanému ošetření flexibilních endoskopů. Jedná se o patentovaný sušicí systém, který byl vyvinut s cílem zajistit ergonomickou manipulaci pro jeho uživatele, optimální polohování endoskopu a prokázanou účinnost sušení.



V SOULADU S NORMOU 16442

Sušicí a skladovací skříň WASENBURG® DRY320 splňuje požadavky normy EN 16442 a je vyvinuta a vyrobena v souladu s normou ISO 13485. Sušicí a skladovací skříň WASENBURG® DRY320 poskytuje nejvyšší standard ochrany a hygieny endoskopů po procesu mytí a dezinfekce.

OPTIMÁLNÍ PROCES SUŠENÍ

Endoskopy v našich sušících skříních jsou uloženy ve svislé závěsné poloze, což usnadňuje proces sušení působením gravitace. Vertikální zavěšení je doporučováno v pokynech výrobců flexibilních endoskopů a je v souladu s doporučeními pokynu ESGEESGENA 939.

Kontrolované prostředí zaručuje, že nedochází ke zhoršení mikrobiologické kvality endoskopu, a zabraňuje tvorbě biofilmu.

PRODLOUŽENÉ SKLADOVÁNÍ

Naše sušicí skříně zaručují kontrolované a bezpečné skladování, které zachovává umytý a vydezinfikovaný stav endoskopu až po dobu 30 dnů.*

Prodloužená doba skladování v klimatizovaném prostředí umožňuje vyšší efektivitu na oddělení díky zajištění okamžitého přístupu k endoskopům, když jsou potřeba. Díky plynulému proudění vzduchu v okolí endoskopu po celou dobu skladování endoskopu se zachovává dezinfikovaný stav endoskopu.



* Dbejte rovněž místních pokynů.

VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE

WASSENBURG® DRY320 má jedinečný a patentovaný systém výsuvného umístění. Tato revoluční konstrukce umožňuje uživatelům všech výšek pohodlně umístit, připojit a vyjmout endoskop ze skříňky bez fyzické námahy. Díky integraci LED indikátorů do polohovacích systémů má uživatel možnost sledovat stav endoskopu na první pohled a na dálku.

VYSOKÁ SKLADOVACÍ KAPACITA

Robustní konstrukce umožňuje stabilní umístění každého endoskopu v polohovacím systému. Každý endoskop má individuální připojení, které zajišťuje optimální proudění vzduchu přes kanály endoskopu pomocí filtrovaného stlačeného vzduchu.

KOMPLETNÍ ZÁZNAM PROCESU

Naše řešení jsou navržena tak, aby přispěla k plně kontrolovanému a bezpečnému ošetření flexibilních endoskopů. Sledovatelnost je klíčová pro kontrolu vašeho provozu a nezbytná pro dodržování směrnic. Integrovaná sledovatelnost podporuje uživatele v dodržování platných standardů kvality.

Všechny kroky procesu sušení v zařízení WASSENBURG® DRY320 jsou podrobně sledovány a monitorovány, přičemž zpráva je odeslána na integrovanou tiskárnu a případně do našeho specializovaného softwaru WASSENBURG® Process Manager. Shromažďují se procesní data, která poskytují smysluplné informace o všech procesech, které proběhly v sušící a skladovací komoře.

Software WASSENBURG® Process Manager bez problémů spolupracuje se zařízením WASSENBURG® DRY320, aby vyhovoval předpisům, a poskytuje cenné informace o každodenním provozu, čímž vám pomáhá zvyšovat spolehlivost a dostupnost vašich endoskopů.



WASSENBURG® DRY320 SPECIFICATIONS

Rozměry	Šířka	1300 mm
	Hloubka	453mm
	Výška	2074mm
Hmotnost	200 kg (prázdná)	
Požadavky na napájení	230 VAC; 50-60 Hz; 2.2A	
Připojení napájení	Standardní vidlice	
Počet pozic	10	
Prostor pro endoskop	99 mm	
Čas sušení	90 minut	
Max. doba uskladnění	30 dní	
Provozní teplota	18°C - 35°C	
Tlak	2 – 8 bar	
Max spotřeba	100L/min	
HEPA filtr	H13	
HEPA filtr odpor	250 Pa	



DESIGNED FOR COMPLIANCE

- ISO 13485
- EN 16442



Wassenburg Medical B.V.
Edisonring 9

6669 NA DODEWAARD THE
NETHERLANDS

T: +31 (0)448 700 500

F: +31 (0)448 453 685

info@wassenburgmedical.nl

www.wassenburgmedical.com

© Copyright 2023. Subject to alterations.